




Instrucciones de montaje de la serie ComforTrak™

EP-560, EP-860, EP-960 & EP-970 Models

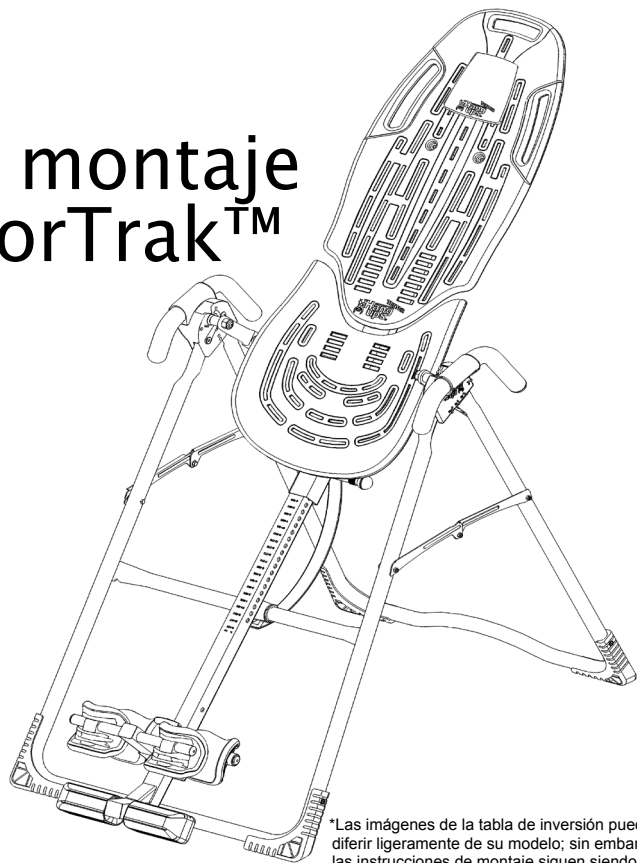

*Las imágenes de la tabla de inversión pueden diferir ligeramente de su modelo; sin embargo, las instrucciones de montaje siguen siendo las mismas. Aquí se muestra la EP-560.

ANTES DE COMENZAR: Revise todos los pasos antes de comenzar el montaje y lea todas las medidas de seguridad antes de utilizar la tabla de inversión. Siga con cuidado las instrucciones de montaje y respete el Manual del Usuario para garantizar la seguridad y la integridad del producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA TABLA DE INVERSIÓN.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA. Para reducir el riesgo de lesiones físicas:

- Lea y comprenda todas las instrucciones, vea el video de instrucciones, repase todos los documentos adjuntos e inspeccione el equipo antes de utilizar la tabla de inversión. Es su responsabilidad familiarizarse con el uso adecuado de este equipo y los riesgos inherentes de la inversión, como caer sobre la cabeza o el cuello, pellizcarse, quedar atrapado o fallas en el equipo. Es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios del producto sean informados completamente sobre el uso adecuado del equipo y de todas las precauciones de seguridad.
- Es necesario que haya supervisión cuidadosa cuando se utilice la tabla de inversión cerca de niños o personas inválidas o con discapacidades, así como cuando dichas personas la usan.
- Utilice esta tabla de inversión sólo para los fines descritos en este manual. NO utilice accesorios que no estén recomendados por el fabricante.
- **NUNCA** deje caer ni introduzca ningún objeto en los orificios.
- **NO** utilice ni almacene este producto al aire libre.
- **NO** utilice este producto si usted mide más de 6 pies y 6 pulgadas (198 m) o pesa más de 300 lb (136 kg). Podría producirse un fallo estructural o la cabeza/cuello podrían impactar contra el suelo durante la inversión.
- **NO** permita que los niños utilicen esta máquina.
- Mantenga a los niños, adultos y mascotas lejos de la máquina mientras se encuentre en uso.
- Mantenga el cuerpo, el cabello, la ropa suelta y las joyas lejos de las piezas móviles.
- La tabla de inversión no tiene piezas que el usuario pueda reparar.
- Este producto está diseñado para uso exclusivo en interiores. **NO** lo utilice en ningún entorno comercial, de alquiler o institucional.

NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES NI LAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ANTES DE COMENZAR: Revise todos los pasos antes de comenzar el montaje y lea todas las medidas de seguridad antes de utilizar la tabla de inversión. Siga con cuidado las instrucciones de montaje y respete el Manual del Usuario para garantizar la seguridad y la integridad del producto.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR LA TABLA DE INVERSIÓN.

 ADVERTENCIA

- **NO** utilice el equipo sin la aprobación de un médico autorizado o sin antes revisar las contraindicaciones médicas, como se señala en el Manual del Usuario.
- Si no se monta o utiliza el equipo como se indica, puede anularse la garantía de este producto y podría causar lesiones o incluso la muerte.
- Elija una superficie plana para el montaje y el funcionamiento de la tabla.
- Siga cada paso en el orden que se indica. **NO** omita ningún paso.
- Revise que todos los sujetadores estén seguros.
- **SIEMPRE** pruebe e inspeccione la tabla. Asegúrese de que la tabla rote suavemente hacia la posición invertida y de vuelta.
- **SIEMPRE** reemplace las piezas defectuosas de inmediato o no utilice el equipo hasta que se lo repare.


NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES NI LAS ADVERTENCIAS PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Artículos para el montaje

Debe tener todos los artículos enumerados a continuación. Si tiene alguna pregunta sobre el montaje, llame al Servicio de Atención al Cliente al 1-800-847-0143.

ARTÍCULOS PARA EL MONTAJE	NÚMERO DE PIEZA	ARTÍCULOS PARA EL MONTAJE	NÚMERO DE PIEZA	ARTÍCULOS PARA EL MONTAJE	NÚMERO DE PIEZA
Estructura en A	E6-1100	Eje principal <i>con</i> Mecanismo de seguridad para tobillos de pasador en T (EP-560 & EP-860)	E6-1600	Juego de empuñaduras	
Correa de sujeción (EP-560)	F5-1007			Empuñaduras Stretch Assist™ (2) (EP-560)	E6-1500
Correa EZ-Angle™ (EP-860, EP-960, EP-970)	F5-1008	Barra trasera para tobillos	IA-1113	Empuñaduras Stretch Max™ (2) (EP-860, EP-960, EP-970)	E6-1520
Patas estabilizadoras (2) <i>May come pre-assembled</i>	F7-1033	Soporte trasero para talones (one pre-assembled, one separate)	EP-1054	Pernos y tuercas (2) (EP-860, EP-960, EP-970)	H1-1209
Tornillos (2)	E1-1002	Tapón de caucho (1)	F5-1056	Tornillos de cabeza Allen (4) <i>Una premontada, una separada</i>	H1-1202
Tabla ComforTrak™		Perno y tuerca (1)	F5-1087		
Parte superior de la tabla	E6-1300A	Tornillo (1)	H1-1200	Juego de bisagra deslizant	
Parte inferior de la tabla	E6-1300B			Bisagras deslizantes de tres orificios (2) (EP-560 & EP-860)	F5-1064
Almohada para la cabeza	E6-1105	Barra delantera para tobillos	EP-1045B	Bisagras deslizantes de tres orificios de empuñadura de tracción (2) (EP-560 Sport, EP-960, EP-970)	TR-1003
Pernos y tuercas (3)	F1-1390	Perno (1)	F5-1089		
Extensión de la estructura de la tabla ComforTrak™	E6-1380	Tuerca (1)	H1-3007	Herramientas	
Eje principal <i>con</i> Mecanismo de seguridad para tobillos EZ-Reach™ (EP-960)	E6-1630	Tapón de extremo (1)	F5-1048	Llaves de 10/13 mm (2)	F5-1088
Eje principal <i>con</i> Mecanismo de seguridad para tobillos Deluxe EZ-Reach™ (EP-970)	NX-1630B	Barra Ankle Comfort Dial	IA-1119	<i>Embalado con las bisagras deslizantes</i>	
		Ankle Comfort Dials (2) (one pre-assembled, one separate)	IA-1118	Llave Allen de 5 mm	IA-1149
		Tornillo (1)	IA-1123	Destornillador	F5-1130

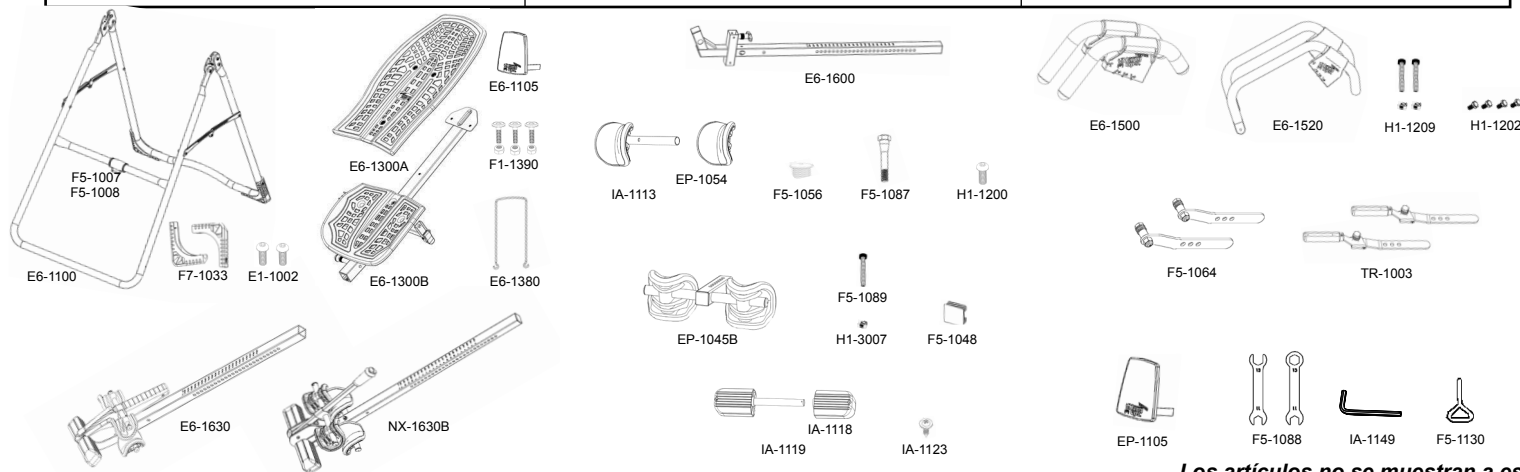

Los artículos no se muestran a escala.

ANTES DE COMENZAR

Antes de continuar con la lectura, estudie el siguiente dibujo para familiarizarse con los componentes importantes de su nueva tabla de inversión de Teeter Hang Ups® .

- | | |
|----|--|
| 1 | Almohada para la Cabeza |
| 2 | Extensión de la estructura de la tabla ComforTrak™ |
| 3 | Tabla ComforTrak™ |
| 4 | Bisagras Deslizantes |
| 5 | Empuñaduras |
| 6 | Pasador de seguridad del regulador de altura |
| 7 | Brazos extensibles |
| 8 | Correa |
| 9 | Barra cruzada |
| 10 | Estructura en A |
| 11 | Eje principal |
| 12 | Mecanismo de seguridad para tobillos |
| 13 | Ankle Comfort Dial™ |
| 14 | Patas estabilizadoras |


¿Qué modelo tiene usted?

Importante: Busque el modelo de su tabla de inversión Teeter antes del montaje.

Encontrará el modelo en A) el exterior de la caja o B) la etiqueta con el número de serie ubicada en la parte posterior de la tabla.

Mi número de serie:

No olvide registrar su
garantía en teeter-inversion.com

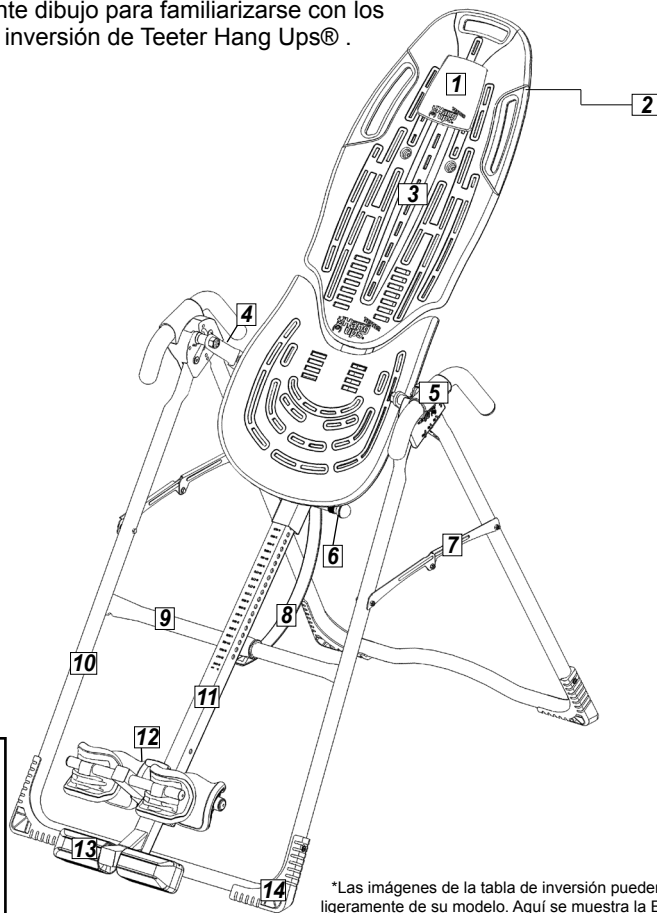

*Las imágenes de la tabla de inversión pueden diferir ligeramente de su modelo. Aquí se muestra la EP-560.


COLOCACIÓN DE LAS ETIQUETAS DE ADVERTENCIA

Importante: Revise todas las etiquetas y los materiales de apoyo antes de utilizar la tabla de inversión.



*¡Esperamos que disfrute de su nueva tabla de inversión Teeter Hang Ups!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-847-0143 o visite www.teeter-inversion.com.*

Este dibujo indica la ubicación de las etiquetas de advertencia que se encuentran colocadas en este producto. Si falta una etiqueta, es ilegible o la han retirado, comuníquese con el Servicio de Atención al Cliente al número de teléfono o al sitio web que se indican al pie de esta página para solicitar una etiqueta de reemplazo sin costo alguno.

Nota: Las imágenes y etiquetas que se muestran a continuación no corresponden al tamaño real.

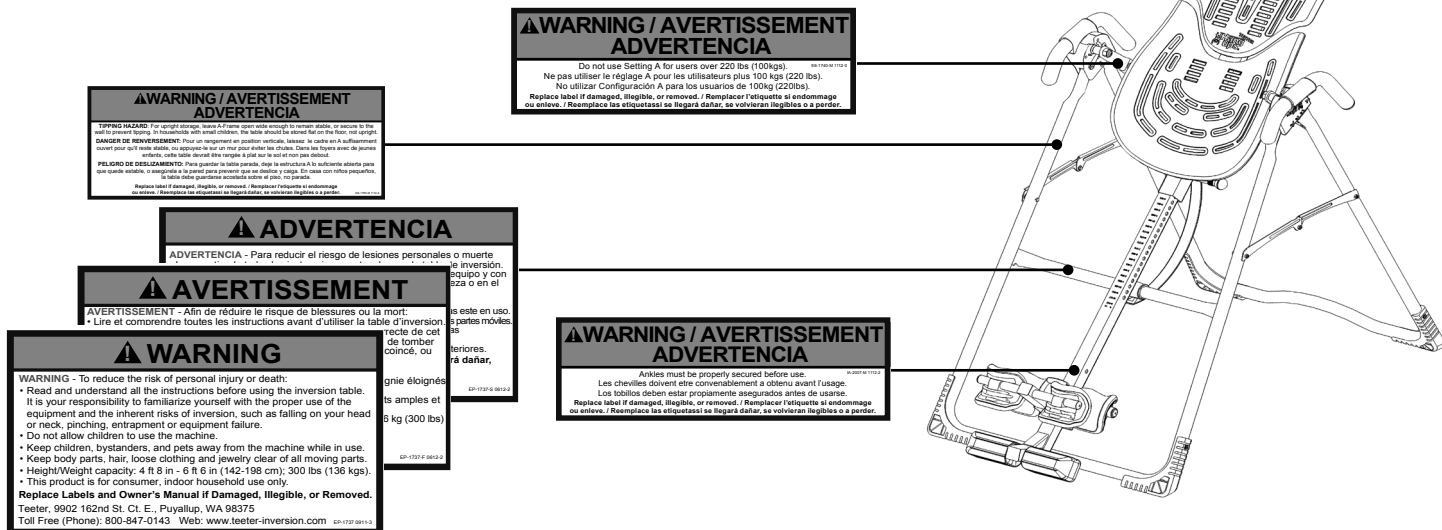

Paso 1

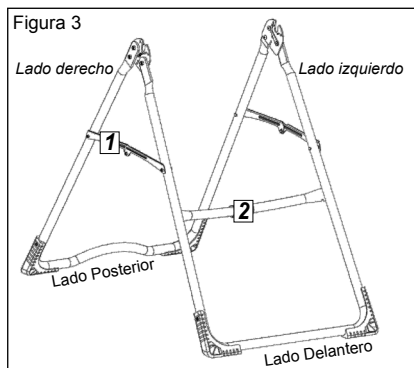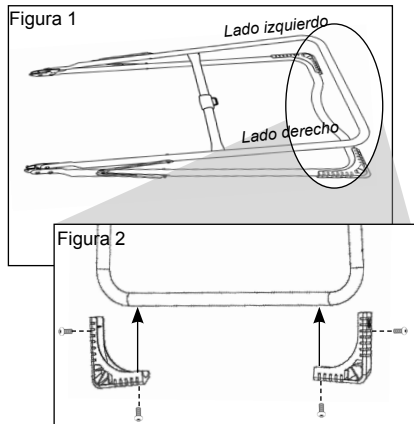

1 Brazos extensibles

2 Barra cruzada

Montaje de las patas estabilizadoras delanteras en la estructura en A

Las patas pueden venir premontadas.

- Apoye la estructura en A sobre el piso con la barra cruzada sobre el lado superior (Figura 1) para montar las patas estabilizadoras delanteras.
- Seleccione la pata estabilizadora etiquetada con el número 1 a cada lado y colóquela a la DERECHA de la estructura en A. Inserte dos de los tornillos (E1-1002), uno de costado y el otro desde atrás (Figura 2). Ajústelos con el destornillador (FS-1130) provisto.
- Repita el procedimiento con la pata estabilizadora número 2 del lado IZQUIERDO (Figura 2).
- Coloque la estructura en A sobre sus patas y ábrala de manera que sus brazos extensibles queden trabados (Figura 3).
- Familiarícese con la parte delantera, posterior, izquierda y derecha de la estructura en A. Consulte este diagrama como referencia durante todo el proceso de montaje.

Figura 4


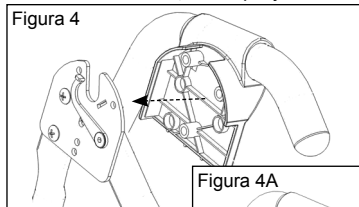


Figura 4A

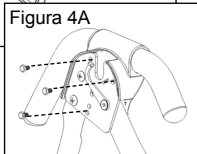

Paso 2

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.

Montaje de las empuñaduras en la tabla (EP-1300)


Los pernos/tuercas pueden venir montados en las empuñaduras.

Solo desatornillelos para sacarlos.


Modelos EP-560: Montaje de las empuñaduras Stretch Assist (E6-1500)

- Coloque cada empuñadura (izquierda y derecha) sobre el borde externo de la placa de bisagra correspondiente. La empuñadura izquierda tiene impresa una «L» y la derecha, una «R». Puede ver dichas letras en el interior de las empuñaduras (Figura 4).
- Inserte tres pernos de cabeza Allen (XX-0000) a través de la placa de la bisagra a cada empuñadura (Figura 4A). Ajustelos con la llave Allen provista y procure no ajustarlos demasiado.

Paso 2

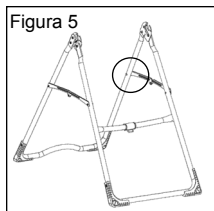

Modelos EP-860, EP-960, EP-970

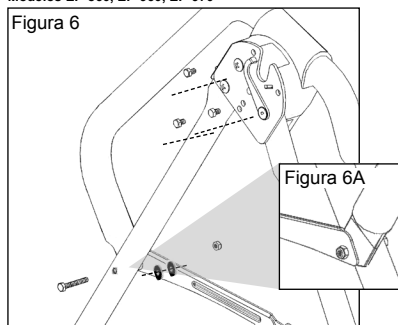

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.



Montaje de las empuñaduras en la tabla (EP-1300)

*Los pernos/tuercas pueden venir montados en las empuñaduras.
Solo desatornillelos para sacarlos.*

EP-860, EP-960 y EP-970: Montaje de las empuñaduras Stretch Max (E6-1520)

- Monte de a un lado. No importa con qué lado comience (derecho o izquierdo).
- Con la llave de 10/13 mm (FS-1088), quite el perno, la tuerca y las tres arandelas de la unión del brazo extensible y la estructura en A (Figura 5). Saque el perno y la tuerca pero deje una de las arandelas.
- Coloque cada empuñadura (izquierda y derecha) sobre el borde externo de la placa de bisagra correspondiente. La empuñadura izquierda tiene impresa una «L» y la derecha, una «R». Puede ver dichas letras en el interior de las empuñaduras (Figura 4).
- Inserte los tres pernos de cabeza Allen (XX-0000) a través de la placa de bisagra a la empuñadura y ajústelos con la mano (Figura 6).
- Coloque la parte inferior de la empuñadura entre el brazo extensible y la pata de la estructura en A. Pase una arandela por el perno e insértela desde el interior de la estructura en A. Asegúrese de que el perno atraviese la pata de la estructura en A, la empuñadura y el brazo extensible. Ensarte una arandela en el extremo y ajústela con la tuerca (Figura 6). Consulte cómo debería verse el montaje terminado en la Figura 6.

Paso 3

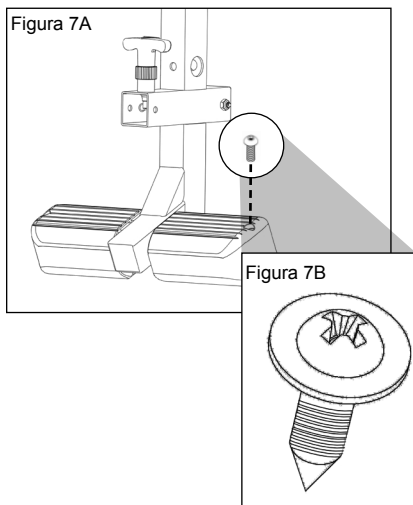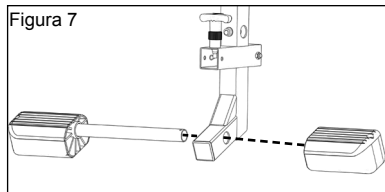

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.

Modelos EP-560 y EP-860: Complete este paso.

EP-560 Sport: Complete este paso para utilizar el mecanismo estándar de seguridad para tobillos. Para su uso con las botas gravitacionales EZ-Up consulte el DVD de ComfortTrack o el anexo que puede encontrarse en la barra de conversión.

EP-960 y EP-970: Omite este paso y siga directamente con el paso 4.





Monte el mecanismo de seguridad para tobillos con el pasador en T en el eje principal (E6-1600)

Instalación de la Ankle Comfort Dial

- Deslice la barra Ankle Comfort Dial (IA-1119) con el cuadrante de comodidad para tobillos en el orificio de la parte delantera de la base del eje principal (Figura 7).
- El cuadrante de comodidad para tobillos está diseñado con una posición alta y una baja. Coloque el cuadrante premontado en la posición baja (con los orificios para tornillos boca arriba) para montarlo con facilidad. Deslice los dos cuadrantes de comodidad para tobillos (IA-1118) a la barra Ankle Comfort Dial.
- Inserte el tornillo (IA-1123) (Figura 7A) y ajústelo con el destornillador provisto (FS-1130). Consulte la imagen detallada del tornillo (IA-1123) en la Figura 7B.

NOTA: Consulte la descripción completa de la configuración del cuadrante de comodidad para tobillos en el Manual del Usuario.

Paso 3

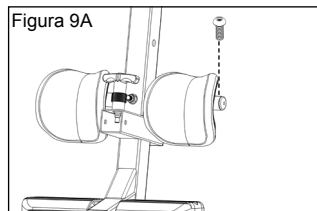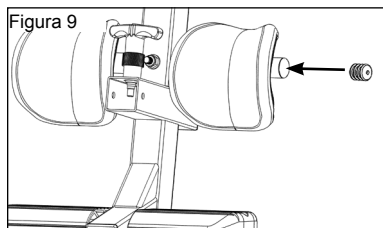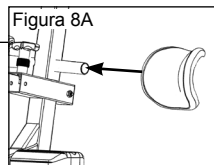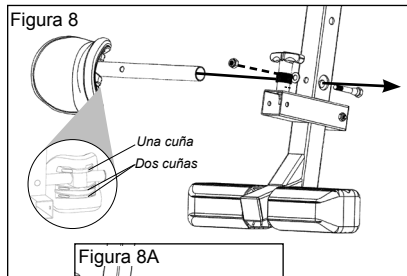

Instale el juego de la barra trasera para tobillos.

- Con las dos cuñas del soporte para talones premontado en el fondo, inserte la barra trasera para tobillos (IA-1113) en el orificio grande de la parte trasera del eje principal (Figura 8).
- Inserte el perno (F5-1087) desde la parte trasera del eje principal para sujetar la barra trasera para tobillos (Figura 8) y ajústelo con la arandela y la tuerca. Para hacerlo, utilice las llaves.

- Deslice el soporte para talones independiente (EP-1054), con las dos cuñas en el fondo, al extremo abierto de la barra trasera para tobillos (Figura 8A).

CONSEJO: Para facilitar el montaje, gire reiteradamente el soporte para talones mientras lo empuja hacia la barra trasera para tobillos.


- Alinee los orificios pretaladrados del tapón de caucho con los orificios de la barra trasera para tobillos. Inserte el tapón de caucho (F5-1056) en el extremo abierto de la barra trasera para tobillos (Figura 9).

CONSEJO: Quizá le convenga utilizar una maza de caucho para ayudarse con el montaje.

- Sujete el tapón de caucho con el tornillo (H1-1200). Para ello, utilice el destornillador (F5-1130) provisto (Figura 9A). Si el destornillador no ajusta con facilidad, quizá necesite reposicionar la alineación del tapón de caucho.


Paso 3

Figura 10

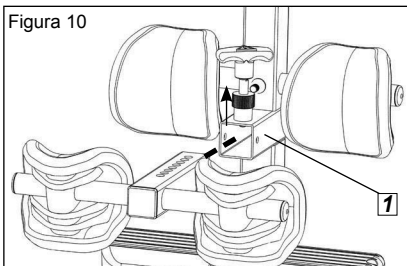

1 Alojamiento de la barra delantera para tobillos

Figura 11

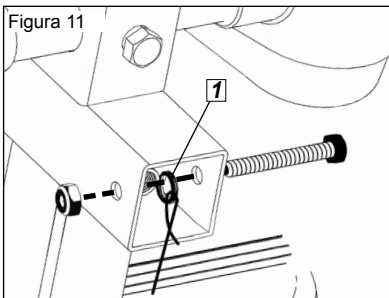

1 Resorte de retención y bucle de cables

Figura 11A


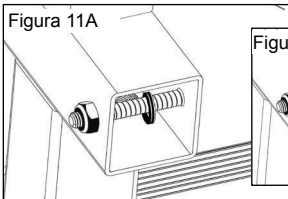


Figura 11B

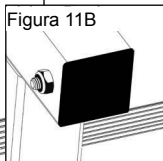



Instale el juego de la barra delantera para tobillos.

- Con los orificios boca arriba, inserte la barra delantera para tobillos (EP-1045B) en el alojamiento para la barra delantera para tobillos (Figura 10). Tire del mecanismo de seguridad de pasador en T para permitir que la barra delantera para tobillos se inserte por completo en el alojamiento.
- Desde el dorso, tire del cierre de la cremallera para estirar el resorte de retención y el bucle de cables de manera que se alineen con los orificios del reverso del alojamiento de la barra delantera para tobillos (Figura 11).
- Inserte el perno (FS-1089) desde el lado exterior del alojamiento en el siguiente orden: orificio, resorte de retención y bucle de cables, orificio (Figura 11).
- Ajuste la tuerca (H1-3007) con la llave abierta de 13 mm (FS-1088) adjunta.
- Corte la porción larga del cierre de la cremallera con tijeras (Figura 11A) de manera que no interfiera con la función del resorte de retención. Cubra el extremo abierto con la tapa de extremo (FS-1048) (Figura 11B).


⚠ ADVERTENCIA

¡No montar como corresponde el sistema de bloqueo para tobillos de pasador en T podría ocasionar lesiones graves o incluso la muerte!

Paso 4

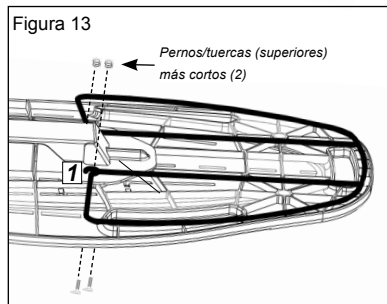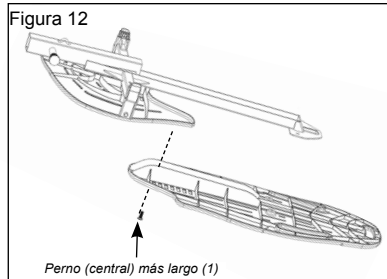

1 Extensión de la estructura de la cama - Bucle

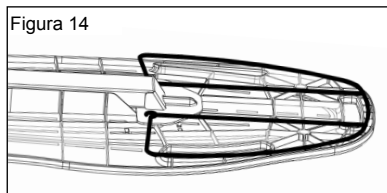

Montaje de la tabla (E6-1300) y extensión de la estructura de la tabla (E6-1380)

NOTA: Durante el resto de las instrucciones de montaje, nos referiremos a este juego como tabla (IA-6-1300).

- Ubique los siguientes artículos para montar la tabla:

Parte superior de la tabla ComforTrak™ (E6-1300A)
 Estructura de la tabla ComforTrak™ (E6-1300)
 Extensión de la estructura de la tabla (E6-1380)

Llave de 10 / 13 mm (F5-1088)
 Pernos y tuercas (F1-1390)
 Llave Allen de 5 mm (IA-1149)

- Coloque la parte superior de la tabla ComforTrak™ (E6-1300A) boca abajo en el piso.
- Coloque la estructura de la tabla (E6-1300) ComforTrak™ boca abajo, encima de la parte superior y alinee los orificios de los pernos.
- Por debajo, inserte el perno más largo en el orificio central y ajústelo a mano con una tuerca (Figura 12).
- Por debajo, inserte uno de los pernos más cortos en uno de los orificios de la parte superior y manténgalo en su lugar. Deslice uno de los bucles de la extensión de la estructura de la tabla sobre el perno y ajústelo a mano con una tuerca (Figura 13).
- Repita el procedimiento del otro lado con los otros pernos más cortos (Figura 14).
- Para fijar por completo las tres tuercas a los pernos, inserte la llave Allen de 5 mm (IA-1149) en la cabeza del perno y apriete la tuerca con la llave de 10 / 13 mm (F5-1088).

Paso 5

Figura 15



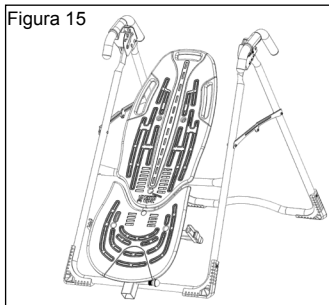


Figura 16

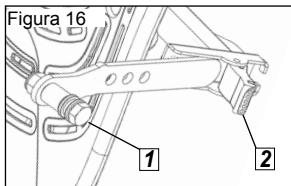

- 1 Pasador de pivote
- 2 Leva de bloqueo

Figura 17

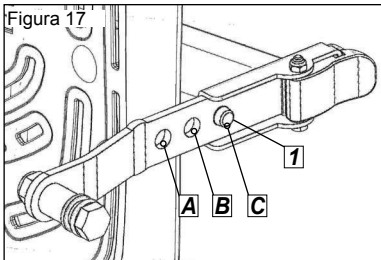

- 1 Pasador de soporte

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.

Montaje de las bisagras deslizantes en la tabla (EP-1300)

EP-560, EP-560 Ltd. y EP-860: Utilice bisagras deslizantes de tres orificios (FS-1064)

EP-560 Sport, EP-950 y EP-970: Utilice bisagras deslizantes de tres orificios con empuñaduras de tracción (TR-1003)

- Para facilitar el montaje, recueste la tabla contra la barra cruzada (Figura 15).
- Abra las levas de fijación que se encuentran en cada lado de la tabla (Figura 16).
- Con el pasador de pivote hacia afuera, inserte las bisagras deslizantes en los soportes ubicados a cada lado de la tabla. Las bisagras deslizantes deben deslizarse entre las levas de bloqueo y los soportes (Figura 16).
- Enganche uno de los orificios de la bisagra deslizante sobre el pasador del soporte. Asegúrese de que las bisagras deslizantes estén colocadas en los orificios en la misma altura en ambos lados. La Figura 17 muestra las bisagras deslizantes colocadas correctamente, con el pasador de soporte trabado en la posición C.
- Empuje hacia abajo las levas de bloqueo (Figura 18) para asegurar las bisagras deslizantes.

NOTA: Consulte la explicación de las posiciones de los orificios en el Manual del Usuario. Si no está seguro, empiece con la posición C.

Figura 18



! ADVERTENCIA

NUNCA desmonte la bisagra deslizante

Paso 6

Figura 19



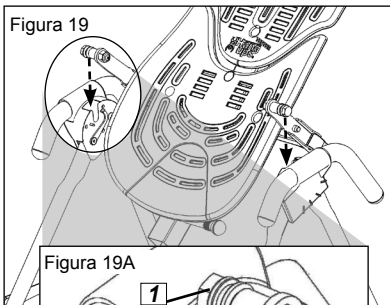


Figura 19A

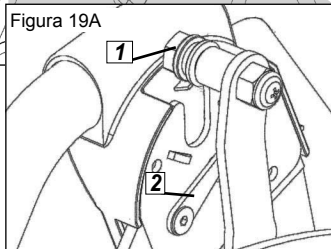

- 1 Pasador de pivote de bisagra deslizante
- 2 Ganchos de autobloqueo

Figura 20

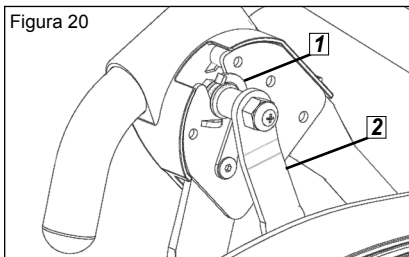

- 1 Ganchos de autobloqueo
- 2 Bisagras deslizantes

Sujeción de la tabla (E6-1300) a la estructura en A (E6-1100)

- Levante la tabla y sostenga cada lado cerca de las bisagras deslizantes. Párese frente a la estructura en A, donde está ubicada la barra cruzada (remítase a la Figura 3 para identificar la parte delantera de la estructura en A).
- Baje cada pasador de pivote de las bisagras deslizantes para que entre en las bisagras de la estructura en A, un lado a la vez (Figuras 19 y 19A). Al ejercer presión, los ganchos de autobloqueo se abren para dejar que el pasador de pivote entre en la ranura y después se cierran de manera automática sobre el pasador de pivote.


NOTA: Es posible que necesite ejercer presión hacia afuera sobre la estructura en A para que el segundo pasador de pivote se fije en su lugar.

- Asegúrese de que cada pasador de pivote se asiente en la base de la ranura de la placa de la bisagra (Figura 20), que los ganchos de autobloqueo se hayan cerrado sobre los pasadores de pivote y que la tabla rote sin inconvenientes.


⚠ ADVERTENCIA

Una indicación de que el ensamblaje no se ha realizado correctamente es que los ganchos de autobloqueo no se cierran sobre los pasadores de pivote de las bisagras deslizantes. ¡Si no se corrige, podría causar graves lesiones e incluso la muerte!

Paso 7

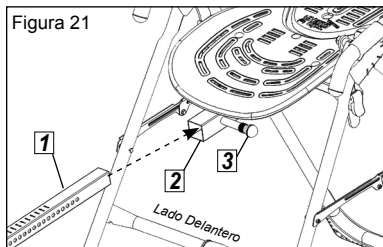

- 1 Eje principal
- 2 Alojamiento del eje principal
- 3 Pasador de seguridad del regulador de altura

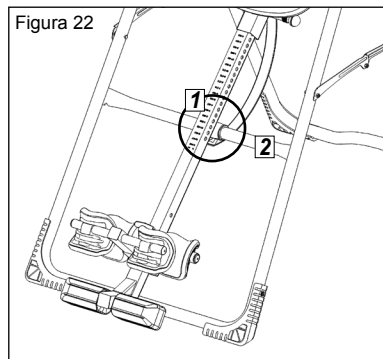

- 1 Posición de apoyo correcta
- 2 Barra cruzada

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.

Inserción del eje principal en la tabla

EP-560 y EP-860: Utilizan el eje principal con el mecanismo de seguridad para tobillos de pasador en T (E6-1600)

EP-960: Utiliza el mecanismo de seguridad para tobillos con trinquete EZ-Reach (E6-1630)

EP-970: Utiliza el mecanismo de seguridad para tobillos con trinquete EZ-Reach Deluxe (NX-1630B)

- Deslice el extremo del eje principal en el alojamiento del eje principal (Figura 21) que se encuentra en la base de la tabla, con las posiciones de ajuste de altura del eje principal hacia arriba.
- Tire del pasador de bloqueo del regulador de altura para permitir que el eje principal se deslice más hacia adentro y luego suelte el pasador en la posición de altura deseada. Consulte el Manual del Usuario para obtener más información sobre la selección de la altura.
- El eje principal **DEBE ESTAR APOYADO** contra la barra cruzada de la estructura en A (Figura 22).

NOTA: La barra cruzada evita que la tabla rote hacia adelante cuando el usuario pisa el cuadrante de comodidad para los tobillos. Si el eje principal no se apoya sobre la barra cruzada como se muestra en la Figura 23, entonces la tabla se ha montado al revés en la estructura en A. Esto **DEBE CORREGIRSE** antes de utilizar el producto.

! ADVERTENCIA

Si su tabla de inversión Teeter Hang Ups se ve como la de alguna de estas imágenes, la ha montado de manera incorrecta y no es apta para su uso. ¡Montarla incorrectamente podría provocar lesiones graves o incluso la muerte!

Imagen A

Regrese a las instrucciones del paso 5.

Demuestra que las bisagras deslizantes se han montado al revés en la tabla y debe corregirlas.


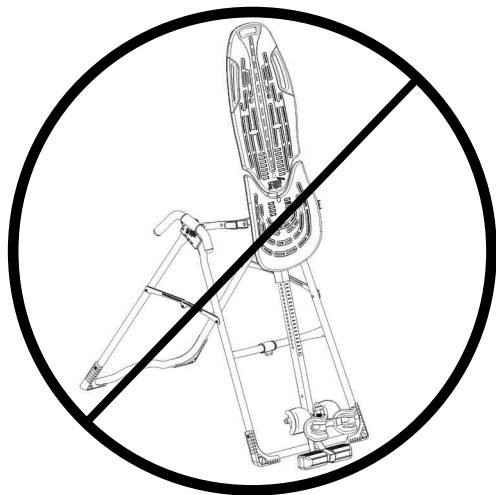


Imagen B

Regrese a las instrucciones del paso 6.


Demuestra que la tabla se ha montado en la estructura en A al revés y debe corregirla.

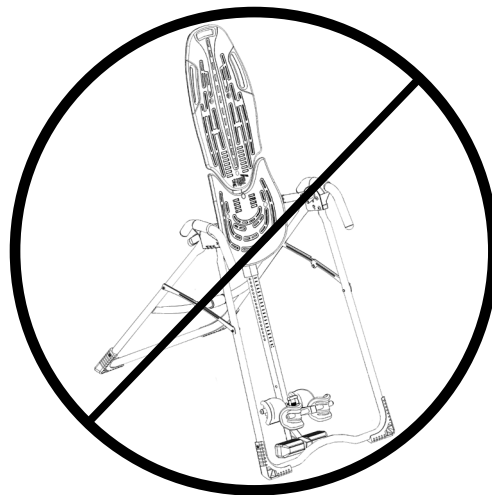

*¡Esperamos que disfrute de su nueva tabla de inversión Teeter Hang Ups!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Departamento de Servicio de Atención al Cliente
al 1-800-847-0143 o visite www.teeter-inversion.com.*

Paso 8

Figura 23

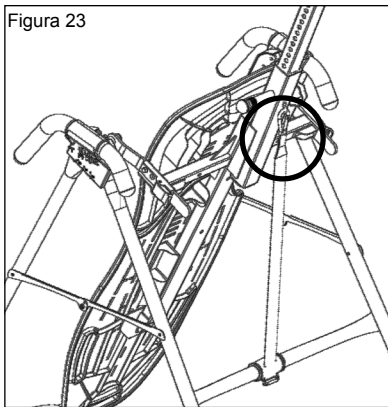

Según el modelo que haya comprado, varían los puntos correspondientes a este paso. Vea «¿Qué modelo tiene usted?» (página 3) para obtener más información.

Montaje de la correa en la tabla (EP-1300)

EP-560 y EP-560 Sport: Utilice la correa de sujeción (F5-1007)

EP-860, EP-960 y EP-970: Utilice la correa EZ-Angle (F5-1008)

- La correa de sujeción viene montada en la estructura en A.
- Despliegue la correa de sujeción ajustable y sujétela a la barra en U en la parte inferior del respaldo (Figura 23).
- Para colocar la correa EZ-Angle en el ángulo deseado, deslice la hebilla hasta que aparezca el marcador de color deseado en el centro.

20° / inversión suave

En el centro de la hebilla deslizable debe aparecer la franja verde.

40° / inversión moderada

En el centro de la hebilla deslizable debe aparecer la franja anaranjada.

60° / inversión intermedia

En el centro de la hebilla deslizable debe aparecer la franja roja.

Este es el ángulo en el cual se realiza la descompresión.

90° / inversión avanzada

Desconecte la correa de la barra en U para permitir la rotación a la inversión completa.

Paso 9

Figura 24


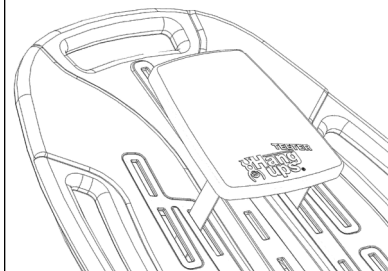


Figura 25

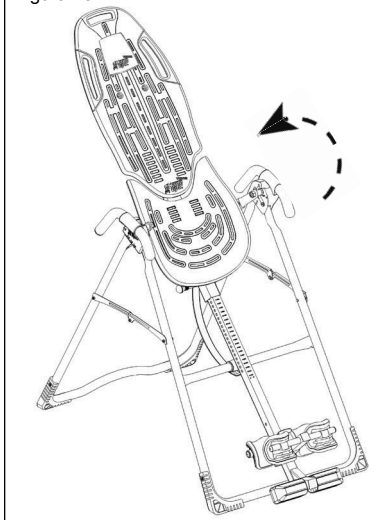

Sujeción de la almohada para la cabeza (EP-1105)

- Para sujetar la almohada para la cabeza, sujete las correas de Velcro a través de los orificios de la tabla (Figura 24). La posición de la almohada puede ajustarse según el usuario.

Adjunción del Manual del Usuario

El Manual del Usuario contiene información importante respecto de cómo utilizar Teeter Hang Ups, incluido cómo personalizar los ajustes del usuario, sujeción y liberación apropiada del mecanismo de seguridad para tobillos y prueba y ajuste del control de rotación.

- Si no se encuentra adjunto, enhebre la cadena de metal adjunta por el orificio preperforado de la esquina superior del Manual del Usuario.
- Sujete la cadena a la estructura en A mediante el orificio de la placa de la bisagra destinado a ese fin (Figura 25). Deje que el Manual del Usuario cuelgue con libertad en el exterior de los brazos extensibles de la estructura en A de manera que no interfiera con la rotación de la tabla.

IMPORTANTE: No quite el Manual del Usuario. Siempre debería estar adjunto a la estructura en A de su tabla de inversión como referencia tanto para el ajuste apropiado como para el uso del equipo.

Antes de utilizar


- Revise a mano la tabla de inversión para verificar que la rotación sea constante y suave (Figura 25) y que todos los cierres estén cerrados.
- Complete el registro de la garantía por Internet en www.teeter-inversion.com.

⚠ ADVERTENCIA

Lea todo el Manual del Usuario antes de utilizar su tabla de inversión Teeter Hang Ups. ¡Una configuración incorrecta podría provocar lesiones graves o incluso la muerte!

AJUSTE DE LA POSICIÓN DE LAS BISAGRAS DESLIZANTES

Figura 26

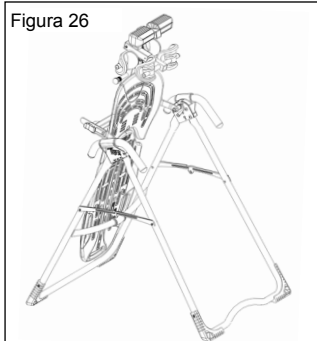


Ajustes: Cambio de la posición de las bisagras deslizantes

Para ajustar la posición de las bisagras deslizantes, deberá retirar por completo la tabla de la estructura en A.

- Quite la correa de sujeción de la barra en U ubicada en la parte inferior de la tabla.
- Tire del pasador de seguridad del regulador de altura y deslice completamente el eje principal hasta el orificio de la última posición.
- Libere y trabe el pasador en la posición de almacenamiento.
- Dé vuelta la tabla en la dirección opuesta a la de uso hasta que haya girado 180° y esté apoyada contra la barra cruzada de la estructura en A (Figura 26).
- Con las palmas hacia arriba, utilice los dedos pulgares para liberar los ganchos de autobloqueo de los pasadores de pivote que están cerca y debajo de las bisagras deslizantes (Figura 27).
- Levante ambos lados de la tabla para sacarlos de la estructura en A al mismo tiempo. CONSEJO: Para un ajuste rápido, recueste la parte superior de la tabla sobre el suelo. Libere las levas de bloqueo de cada bisagra deslizante. Cambie las bisagras deslizantes a la posición deseada (A, B o C).

NOTA: Consulte el Manual del Usuario para obtener más información sobre cómo encontrar su posición de la bisagra deslizante.


Figura 28

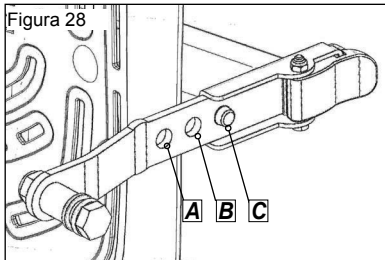

- Trabe de nuevo las levas de bloqueo (Figura 28). Baje las bisagras deslizantes a las placas de bisagra de la estructura en A para colocar de nuevo la tabla en la estructura en A.
- Gire la tabla para que vuelva a la posición de uso y ajuste de nuevo la posición de altura del eje principal.

Mantenimiento y almacenamiento

Figura 29

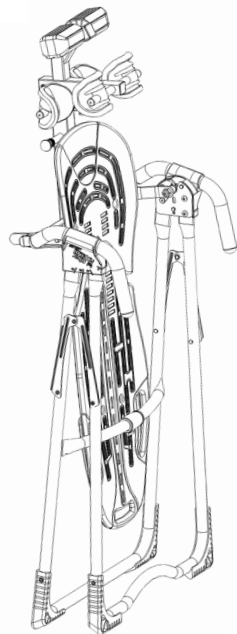

Mantenimiento

- Utilice un paño húmedo para limpiar la tabla de inversión. No utilice limpiadores abrasivos ni solventes.

Almacenamiento

- Quite la correa de sujeción de la barra en U ubicada en la parte inferior de la tabla.
- Tire del pasador de seguridad del regulador de altura y deslice completamente el eje principal hasta el orificio de la última posición.
- Libere y trabe el pasador en la posición de almacenamiento.
- Dé vuelta la tabla en la dirección opuesta a la de uso hasta que haya girado 180° y esté apoyada contra la barra cruzada de la estructura en A.
- Tire de los brazos extensibles para plegar el estructura en A (Figura 29), la cual debe quedar con las patas abiertas a 12" de ancho para brindar estabilidad.

NOTA: Si no se realiza la operación despacio y con cuidado se puede prensar los dedos.

ADVERTENCIA

Peligro de vuelcos: Para el almacenamiento vertical, deje la estructura en A abierta con el ancho suficiente para que permanezca estable, o sujétela a la pared para evitar que se vuelque. En hogares con niños pequeños, la tabla de inversión debe guardarse en posición horizontal sobre el piso, no vertical.



facebook.com/teeterhangups



teeter-inversion.com/blog



twitter.com/teeterhangups



youtube.com/teetertv

Si tiene algún problema para ensamblar el equipo o alguna pregunta con respecto a su uso, comuníquese con nuestro Servicio de Atención al Cliente:

EE.UU.: Teeter
Número gratuito (Teléfono) 800-847-0143
(Fax) 800-847-0188
info@teeter-inversion.com
www.teeter-inversion.com

Internacional: Inversion International, Ltd.
(Teléfono) +1-242-362-1001
(Fax) +1-242-362-1002
info@InversionInternational.com
www.InversionInternational.com



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



Cualquier modificación a este dispositivo anulará la aprobación de UL.

Patentes en trámite en EE. UU. y el extranjero. Teeter Hang Ups es marca registrada de Teeter.
Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.
© COPYRIGHT 2012 Teeter. La ley internacional prohíbe cualquier tipo de reproducción.

EP-1715-S 0413-10